


Kit d'observation "Vers de terre"

Informations indicatives de www.conatex.fr du 23.11.2024/DE1

Référence: 1223010

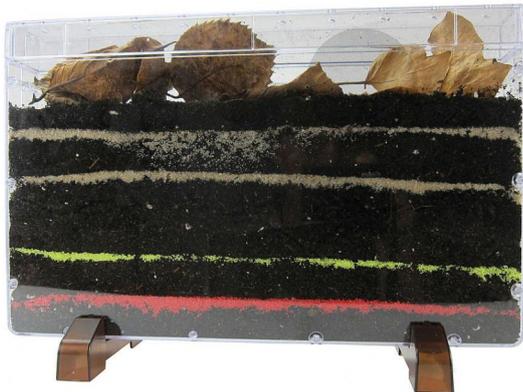

vers la page produit

34,08 € TTC

Regarder les vers de terre creuser le sol et décomposer les feuilles

Le sable coloré permet de suivre facilement le mélange du sol

Les élèves peuvent observer les vers de terre qui travaillent, les observer mélanger le sol et décomposer les feuilles et autres matières organiques. Grâce aux couches colorées, le mélange du sol est clairement visible.

Les vers de terre sont suffisamment alimentés en oxygène par les trous d'aération au sommet. La manchette occultante offre de bonnes conditions de vie pour vaquer à leurs occupations sans être dérangés tant qu'ils ne sont pas observés.

Les expériences suivantes sont réalisables: déterminer la longueur et le poids du ver de terre, observer et décrire la locomotion (Comment rampe un ver de terre ?), examiner les poils du ver de terre, dessiner un ver de terre et décrire son comportement dans le sol et dans l'eau. Etudier ses caractéristiques particulières, ses habitudes, sa structure, son métabolisme et sa reproduction ainsi que son importance pour le développement du sol. Etudier les organes sensoriels du ver de terre, du questionnement à la formulation d'hypothèses, de la planification et de la réalisation d'expériences à la validation, l'évaluation et la documentation, il existe une variété d'options à utiliser.

Les vers de terre trouvent des conditions de vie optimales à des températures comprises entre 10 °C et 15 °C et les vers de compost entre 20 °C et 25 °C. S'il fait plus froid ou plus chaud, ils sont moins actifs ou pas du tout actifs. L'ensemble doit donc être installé dans la plage de température appropriée. En hiver, les vers de terre, comme les insectes, entrent en état d'hibernation.

Vers de terre non inclus dans le kit. Le sol dans le réservoir d'observation doit être humide, mais non gorgé d'eau et non acide.

Dimensions:

29 x 19 x 4 cm

Contenu:

1 récipient en plastique transparent, 2 pieds en plastique, 4 sachets de granulés, 1 housse occultante, Notice en allemand

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be